


## ANLEITUNG ZUR SPEICHELPROBENNAHME

Vorher:

**60 MIN**

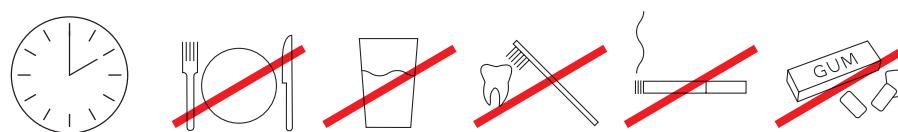

**1** Ampulle öffnen  
und Flüssigkeit in den  
Mund nehmen



**2** Flüssigkeit  
im Mund gut  
schwenken



**3** Ins Gefäß  
spucken



**4** Mit geschlossenem  
Mund trocken  
nachkauen



**5** Nochmals  
ins Gefäß  
spucken



**6** Gefäß gut  
verschliessen.  
Fertig!



**1X WIEDERHOLLEN**